


Administración de alto flujo nasal Optiflow™

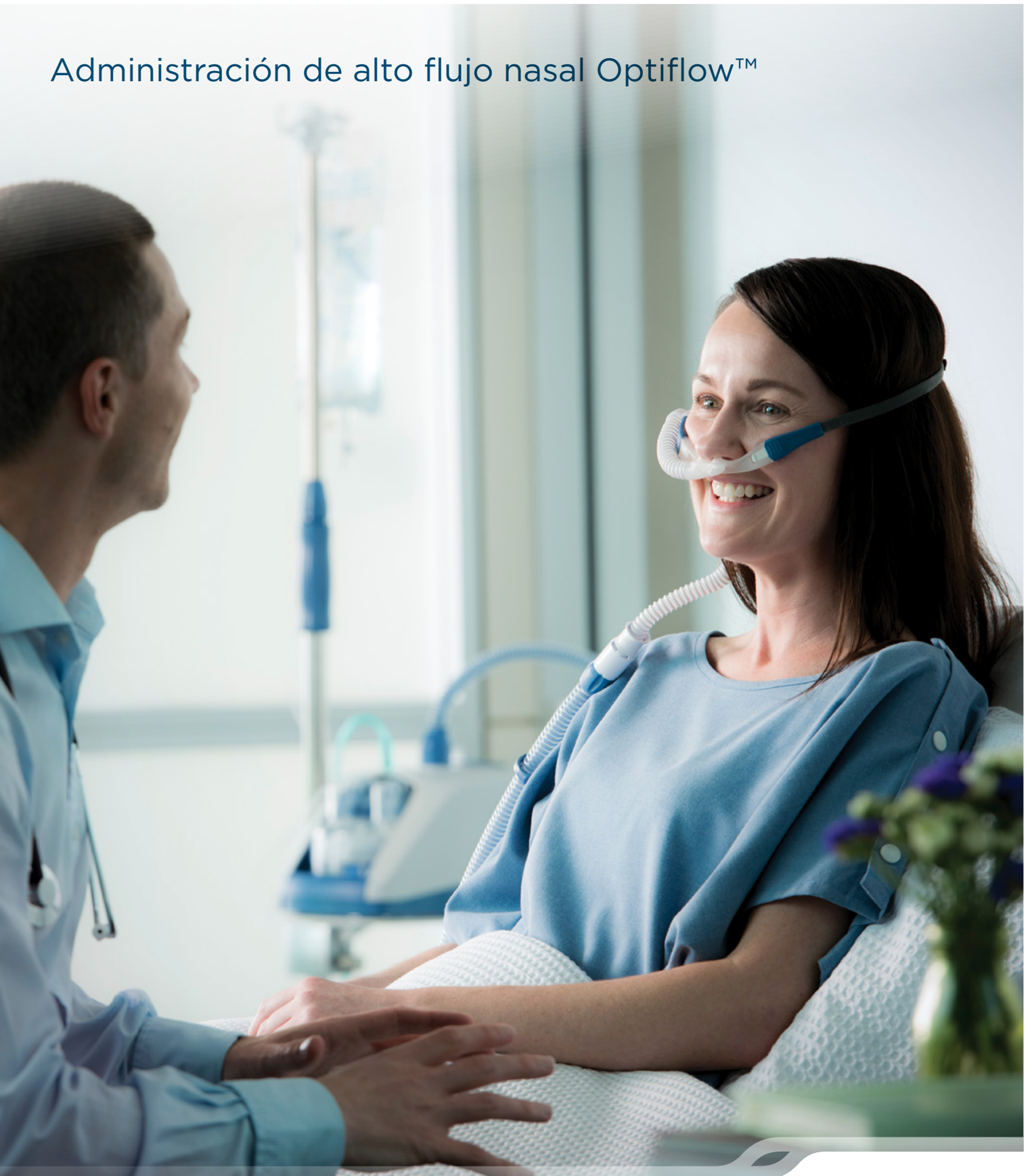

Les presentamos el AIRVO™ 2 de F&P diseñado para proporcionar asistencia respiratoria e hidratación de las vías respiratorias con el mayor grado de comodidad y facilidad de uso.

El AIRVO 2 de F&P se ha diseñado específicamente como una solución integrada para la administración de alto flujo nasal Optiflow™. La tecnología de humidificación líder de Fisher & Paykel Healthcare permite al AIRVO 2 suministrar con comodidad un alto flujo de mezcla de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante la exclusiva interfaz nasal Optiflow.

Configuración ajustable de flujo y temperatura

- Las tres opciones de temperatura (37, 34, 31 °C) favorecen la comodidad y el cumplimiento
- El generador de flujo integrado proporciona un amplio intervalo de flujo de 10 a 60 L/min. a pacientes adultos; y de 2 a 25 L/min a pacientes pediátricos. No requiere suministro de aire de pared

Interfaz nasal Optiflow™+

- Cánulas suaves y flexibles
- Orificios grandes que reducen la inyección de gas
- Cánulas nasales contorneadas según la morfología del paciente



Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)

- El oxígeno también puede suministrarse mediante un dispositivo de pared o bombona
- El analizador de oxígeno ultrasónico integrado no necesita calibración, mantenimiento ni sustitución

Tubo respiratorio calentado AirSpiral™


- Cables calefactores de espiral dobles y exclusivo sensor de temperatura integrado
- No se requieren sondas de temperatura ni adaptadores de cables calefactores externos

Diseñado para un ajuste, uso y limpieza sencillos

- Las animaciones de la pantalla facilitan la configuración y la solución de problemas

Un sistema integrado para administrar alto flujo nasal con Optiflow

- El AIRVO 2 de F&P, con su amplia gama de accesorios, ofrece versatilidad, movilidad y comodidad

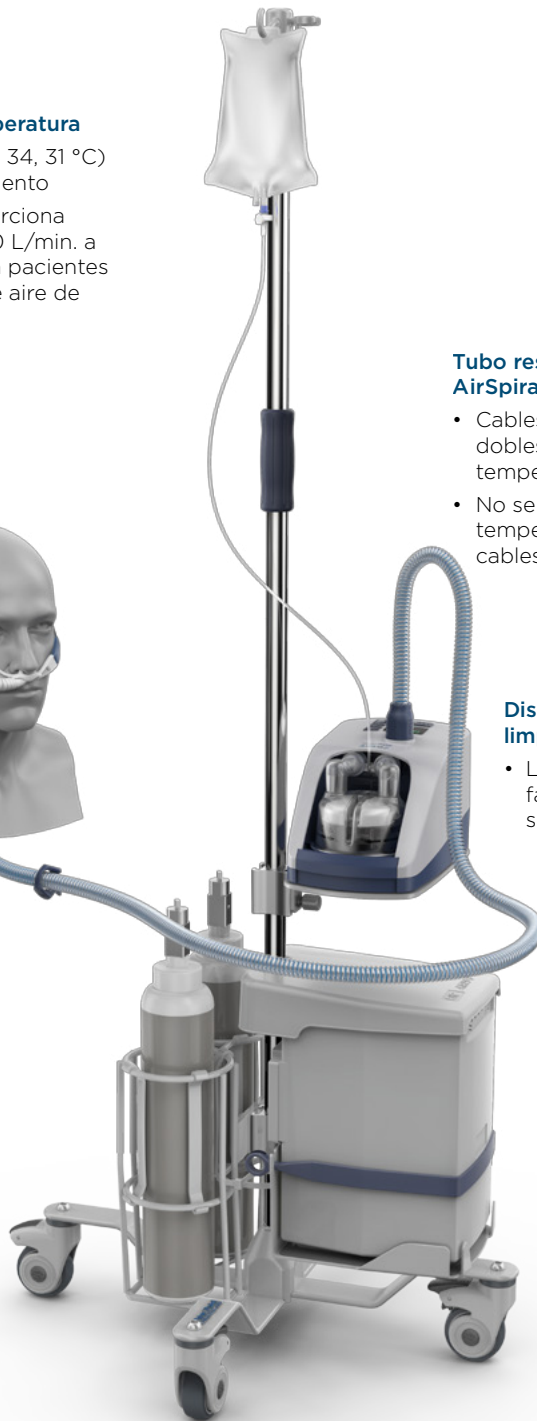

Códigos de producto	
PT101xx	Humidificador AIRVO 2
OPT942	Interfaz Optiflow+ pequeña (paquete de 20)
OPT944	Interfaz Optiflow+ mediana (paquete de 20)
OPT946	Interfaz Optiflow+ grande (paquete de 20)
OPT316	Interfaz de Optiflow Junior para lactantes (paquete de 20)
OPT318	Interfaz de Optiflow Junior pediátrica (paquete de 20)
OPT970	Interfaz de traqueostomía Optiflow+ (paquete de 20)
OPT980	Adaptador de interfaz de máscara Optiflow+ (paquete de 20)
900PT561	Kit de tubo respiratorio calentado AirSpiral y cámara (paquete de 10)
900PT405	Bandeja montada a pedestal
900PT421	Soporte de poste móvil
900PT426	Cesto de plástico
900PT427	Soporte para botella de oxígeno
900PT411	Kit de montaje de SAI

Para obtener más información, visite www.fphcare.com/airvo

Fisher & Paykel
HEALTHCARE